

mediven[®] struva[®] 35

Meias anti-embolia com 35 mmHg de compressão no tornozelo. Também disponíveis como meias esterilizáveis, especialmente para uso no bloco operatório.

Indicações

- Compressão no pós-operatório, de curto prazo, para promover o retorno venoso após intervenções cirúrgicas venosas (laqueações, escleroterapia, extracção da veia e terapia de trombólise)
- Lesões ligamentosas da articulação talocrural
- Cenários clínicos linfológicos ligeiros a moderados
- Para evitar edemas e hematomas
- Tratamento de compressão para trombozes agudas

Modo de acção

O gradiente de pressão estandardizado assegura uma pressão do tornozelo de 35 mmHg que então diminui continuamente em direcção à coxa. Estudos confirmam que o elevado grau de eficácia ao usar mediven struva optimiza a aceleração do refluxo venoso. Isso faz da mediven struva uma alternativa eficaz às ligaduras de compressão convencional para as mesmas indicações.


Características

- Gradiente de compressão de definição precisa para um elevado grau de eficácia clínica
- Condições dolorosas e edemas de janela são evitados com fiabilidade
- Segura, rápida e simples de usar
- Elevado nível de adesão devido ao conforto de utilização
- Sistema de tamanhos com código de cor para a selecção simples do tamanho da meia
- Altamente económica devido à sua utilização múltipla; as feridas são fáceis de inspecionar e tratar
- Indicada para perímetros da coxa até 78 cm



Vantagens do produto

As características únicas do produto satisfazem as mais elevadas exigências de médicos e pacientes, no que toca a cuidados clínicos fiáveis e seguros.

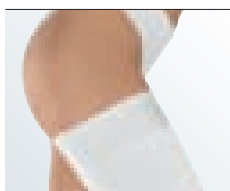

Variante com banda de fixação tricotado

A variante da mediven struva 35 com um remate em tricotado é particularmente indicada para pacientes imobilizados.



Região do calcanhar/peito do pé

O calcanhar em malha assegura a melhor redução possível da pressão e, juntamente com o código de cor, permite reconhecer instantaneamente o tamanho indicado da meia anti-embolismo.



Biqueira aberta

A biqueira aberta é principalmente do interesse da segurança do paciente, visto que permite que a circulação seja monitorizada a qualquer altura e simplifica a higiene dos espaços interdigitais.

Acessórios

mediven struva fix é uma meia transparente, altamente elástica e com boa respiração usada no membro inferior como ligadura universal para inspeção, ao invés de ligaduras de gaze.

Joelho (AD)					
Tamanho	Medidas do membro inferior (perímetro em cm)				Código de cor
	Tornozelo cB	Barriga da perna cC	Abaixo do joelho cD	Coxa cG	Calcanhar
I	17 – 19	30 – 35	28 – 34	–	rosa
II	19 – 21	31 – 37	29 – 36	–	azul
III	21 – 23	32 – 40	30 – 39	–	amarelo
IV	23 – 25	33 – 42	31 – 41	–	vermelho
V	25 – 27	34 – 44	32 – 43	–	cinzento
VI	27 – 29	35 – 46	33 – 45	–	verde
VII	29 – 31	36 – 48	34 – 47	–	castanho
Meia até à coxa (AG) também disponível com cinto					
I	17 – 19	30 – 35	28 – 34	42 – 54	rosa
II	19 – 21	31 – 37	29 – 36	46 – 58	azul
III	21 – 23	32 – 40	30 – 39	50 – 62	amarelo
IV	23 – 25	33 – 42	31 – 41	54 – 66	vermelho
V	25 – 27	34 – 44	32 – 43	58 – 70	cinzento
VI	27 – 29	35 – 46	33 – 45	62 – 74	verde
VII	29 – 31	36 – 48	34 – 47	66 – 78	castanho